


การใช้ Zoom Stereo Microscope

*** พนักงานที่ยังไม่ผ่านการสอนงาน ห้ามใช้เครื่องโดยเด็ดขาด ***

ขั้นตอนการทดสอบ

1. เปิด Switch On (1) ที่ฐานของตัวเครื่อง
2. ปรับ Eyepieces (2) ตามระดับสายตาของผู้ Test
3. ใส่ชิ้นงานที่เตรียมไว้ตรง Stage (3)
4. ทำการปรับหา Focus ภาพ โดยเลื่อนปุ่มปรับภาพหยาบ (5) เพื่อหาดำแหน่งของภาพ และค่อยๆ เลื่อนปุ่มปรับภาพละเอียด (4) เพื่อปรับภาพให้ละเอียดขึ้น

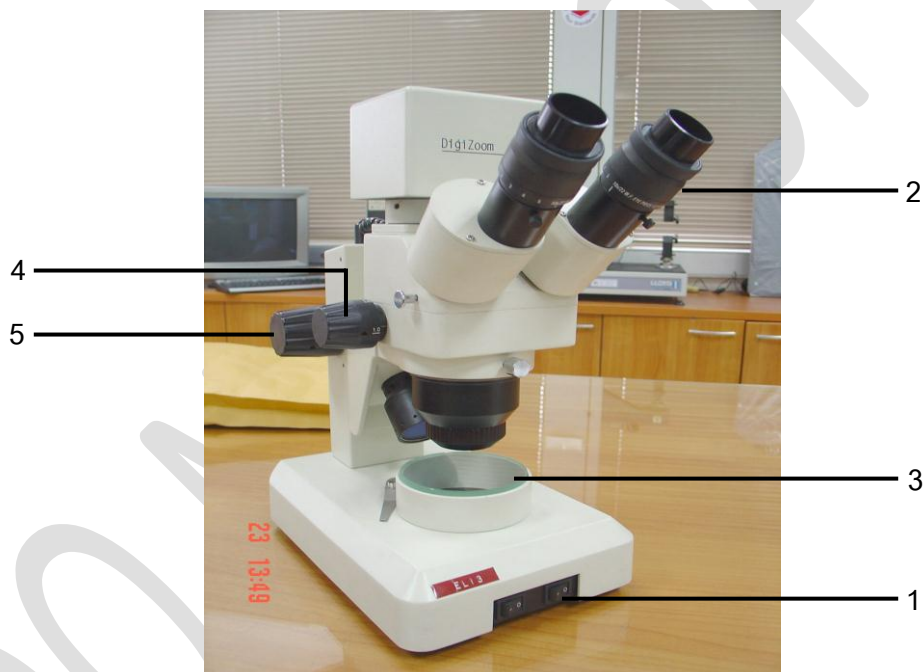

ข้อควรระวัง

1. ขณะปรับภาพ ระวังกระจกสไลด์กระทบกับเลนส์
2. ระวังไม่ให้มือรอยขีดข่วนตามบริเวณหลอดแสงหรือขอบเลนส์
3. ระวัง Stage หล่นหรือกระแทก เพราะอาจทำให้กระจกร้าวหรือบิ่น

การบำรุงรักษา

เช็ดทำความสะอาดเครื่องทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณหลอดแสงเพื่อไม่ให้มีฝุ่น ใช้ผ้าเช็ดเลนส์ ในการทำความสะอาดเลนส์