

การใช้เครื่องทดสอบ Munsell Color



*** พนักงานที่ยังไม่ผ่านการสอนงาน ห้ามใช้เครื่องโดยเด็ดขาด ***

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบกำหนดการสอบเทียบว่าใกล้ถึงกำหนดหรือยังถ้าใกล้แล้วให้แจ้งผู้รับผิดชอบ

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ตรวจวัดสายตา
2. คีย์ประวัติเข้า Program Computer

วิธีการใช้ Munsell Colour (ตรวจวัดสายตา)

1. เปิดกล่อง สลับชิ้นงานแบบ Random แล้วนำเข้ากล่องเหมือนเดิม
2. ให้ผู้ทดสอบจัดเรียงสี โดยเทียบ Shade สีไล่เทียบไปเรื่อยๆ ตามลำดับเฉดสีให้ถูกต้อง โดยใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 20 นาที
3. เสร็จแล้วผู้ตรวจจะตรวจสอบเบอร์ด้านหลังว่าเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่ ถ้าเรียงถูกหมายเลขด้านหลังจะต้องไม่สลับกัน
4. นำไปป้อนข้อมูลใน Program FMHH


วิธีการเข้าโปรแกรม FMHH

1. ในโหมด Standby ของเครื่อง Computer Lab....Double Click เลื่อนไอคอน
หน้าจอจะปรากฏดังรูป



2. ป้อนข้อมูลที่ Test ได้ โดยคลิกสลับตัวเลขตามตำแหน่งที่มีการทดสอบผิดพลาด เช่น 1-2-3 สลับเป็น 1-3-2
ถ้าไม่ผิดไม่ต้องสลับ

3. เสร็จแล้วเลือก New Record ที่หน้าจอจะปรากฏดังรูปให้ตอบ Yes

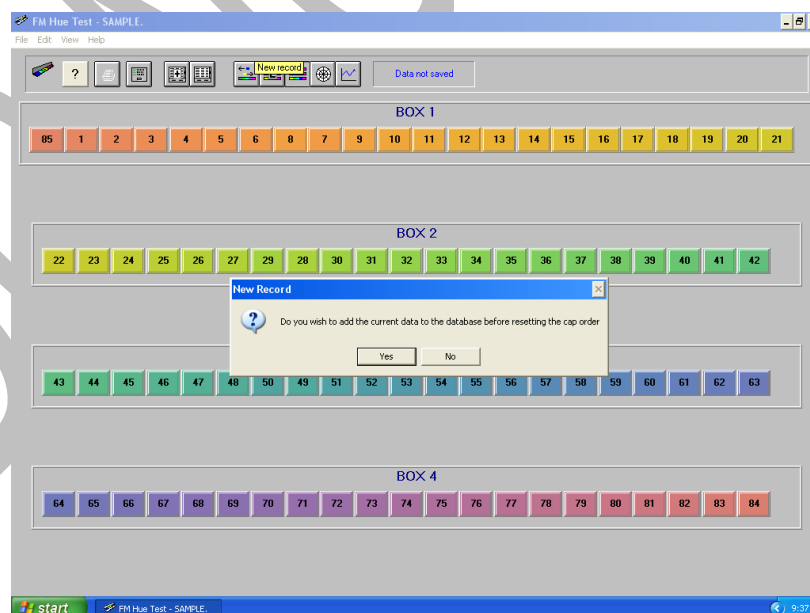

4. เมื่อตอบ Yes หน้าจอจะปรากฏคำว่า **Personal Information** ให้บันทึก ชื่อ วัน/เดือน/ปีเกิด, วันที่ทำการ Test และ เวลาที่ Test เพื่อเก็บเป็นประวัติพนักงาน เสร็จแล้วกด OK.

FM Hue Test - SAMPLE

File Edit View Help

BOX 1

85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Personal Information

First Name:

Middle Name:

Last Name:

Reference Number:

Date of Birth: Month Day Year

Date of Test:

Time taken to complete test: (minutes)

Comments:

OK Cancel

start FM Hue Test - SAMPLE 9:30

5. Double Click เลือก View Database จะพบหน้าจอ Database เลือก File ที่ Test แล้วกด Select

FM Hue Test - SAMPLE

File Edit View Help

Database

ID	Name	Date of Birth	Date of Test
0001	Kannika Kamthukiew	10-25-1978	04-26-2005
0002	Skol Phenmung	04-28-1968	06-01-2005
0003	Sekson Chinchang	10-13-1978	10-31-2005
0004	Sekson Chinchang	10-13-1978	06-01-2005
0005	Sarawut Musigaphan	12-28-1984	10-31-2005
0006	Sarawut Musigaphan	12-28-1984	06-01-2005
0007	Verangkana Mungkaleeeree	07-23-1975	10-31-2005
0008	Verangkana Mungkaleeeree	07-23-1975	06-01-2005
0009	Sapion Sisulee	03-14-1983	10-31-2005
0010	Sapion Sisulee	03-14-1983	06-01-2005
0011	Phanupet Wongtapong	01-01-1978	06-01-2005
0012	Somphong Tuanpeng	12-28-1972	10-31-2005

Cancel Select Delete


Sort by: ☐ Name ☐ Date of Test ☒ File Number ☐ Reference ☐ Date of Birth ☐ Comments

BOX 4


64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

start S-RiteColor Master Microsoft Office Show FM Hue Test - SAMPLE FM Hue Test - SAMPLE 14:02

View Polar Graph

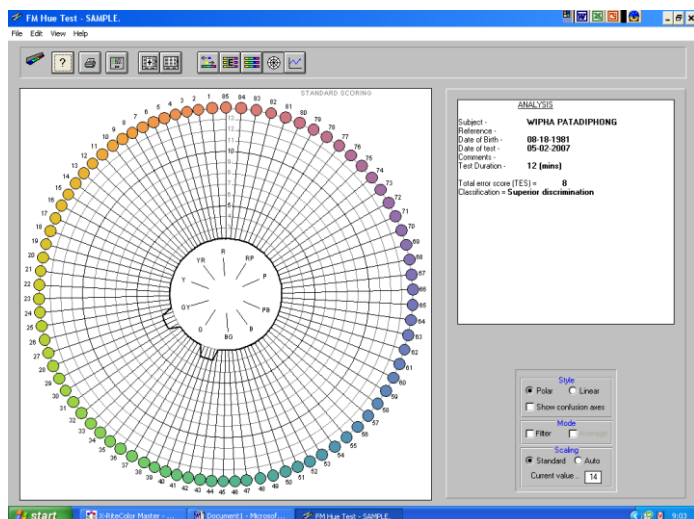

View Linear Graph

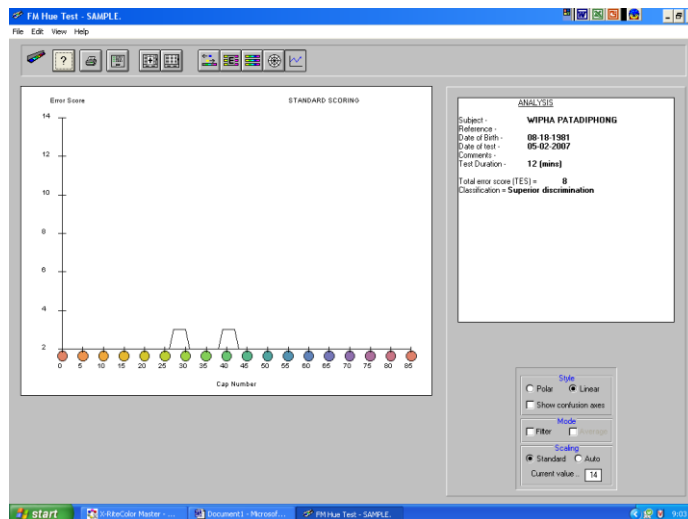

ถ้าค่าเกินจากมาตรฐาน (ดูจากเส้นกราฟยาวเกินเส้นที่บวงแรก) อาจลองให้ Test ใหม่ ถ้ายังไม่ผ่าน ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐาน

ข้อควรระวัง

เวลาทดสอบระวังอย่าให้นิ้วมือสัมผัสผิวหน้าสี

การบำรุงรักษา

1. เก็บให้พ้นแสง
2. รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ