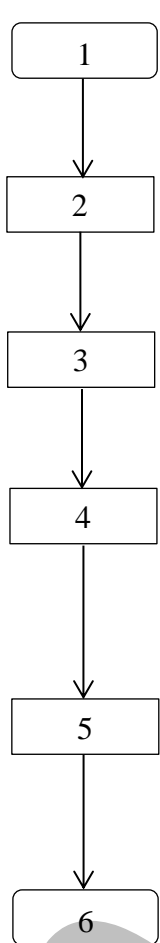


Pellet per gram Test Method

1. แผนผังวิธีการใช้เครื่อง

Flow	กระบวนการ
 <pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] </pre>	<p>1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง</p> <p>2. เปิดเครื่องแล้วปรับลูกน้ำให้ตรงศูนย์กลาง</p> <p>3. นำภาชนะหรือ กรวยกระดาษวางบนจานชั่งแล้วกดปุ่ม Tare ให้ตัวเลขเป็นศูนย์</p> <p>4. กดปุ่ม Tare ให้ตัวเลขเป็นศูนย์ จากนั้นกดที่ปุ่ม Start แล้วนำตัวอย่างใส่จาน 1 กรัม</p> <p>5. นำตัวอย่างมานับจำนวนเม็ด</p> <p>6. จดบันทึกค่าที่ได้</p>

Pellet per gram Test Method

1. ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องชั่งก่อนการใช้งาน

1.2 เปิดเครื่องแล้วปรับลูกน้ำให้ตรงศูนย์กลาง


1.3 นำภาชนะหรือ กรวยกระดาษวางบนจานชั่งแล้วกดปุ่ม Tare ให้ตัวเลขเป็นศูนย์



1.4 กดปุ่ม Tare ให้ตัวเลขเป็นศูนย์ จากนั้นกดที่ปุ่ม Start แล้วนำตัวอย่างใส่จาน 1 กรัม



1.5 นำตัวอย่างมานับจำนวนเม็ด

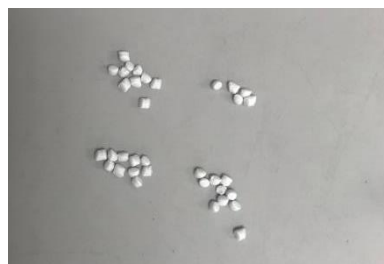

1.6 จดบันทึกค่าที่ได้