


## วิธีการใช้ชุดตรวจสอบสารเสพติดเบื้องต้นชุด ยาบ้า แบบหยด METH CARD

1. หยดตัวอย่างปัสสาวะลงในหลุม Specimen Hole (S) ทดสอบประมาณ 3 หยด

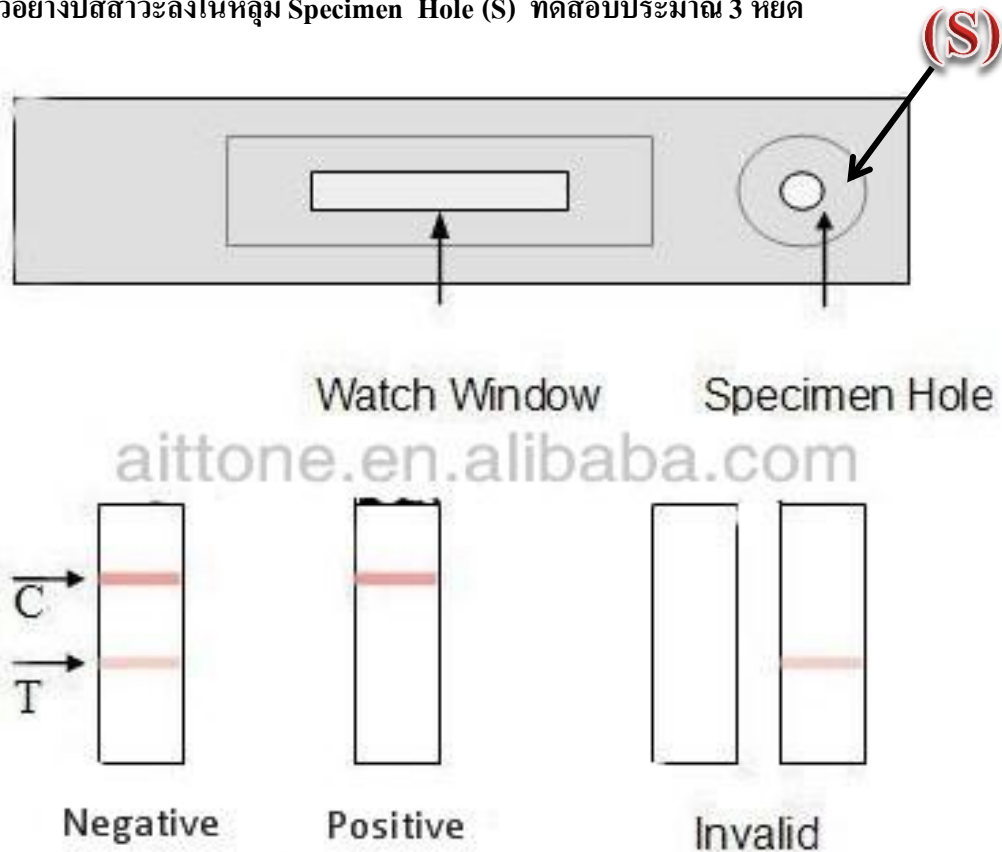

2. ความหมาย แถบ C และ T

C เป็นแถบ Control ใช้บอกว่าเครื่องตรวจนี้ทำงานได้ปกติ ( ขึ้นแถบสี ) ถ้าไม่มีแถบสีเกิดที่แถบ C แสดงว่า เครื่องตรวจนี้ใช้ไม่ได้

T เป็นแถบ Test ใช้บอกผลการทดสอบของการเครื่องตรวจ ( กรณีขึ้นแถบสี หรือ ไม่ขึ้นแถบสี )

สรุปว่าผล Negative คือ ไม่มี Metamphetamine ในปัสสาวะ

จะมีแถบสี 2 แถบ ที่แถบ C และ T

สรุปว่าผล Positive คือ มี Metamphetamine ในปัสสาวะ

จะมีแถบสีม่วง 1 แถบ ที่แถบ C

3. ทิ้งไว้อ่านผลภายใน 3 – 5 นาที โดยอ่านผลจากเครื่องตรวจแบบหยด METH CARD